


FlexCare+

900+ series

Rechargeable
sonic toothbrush



PHILIPS
sonicare
the sonic toothbrush

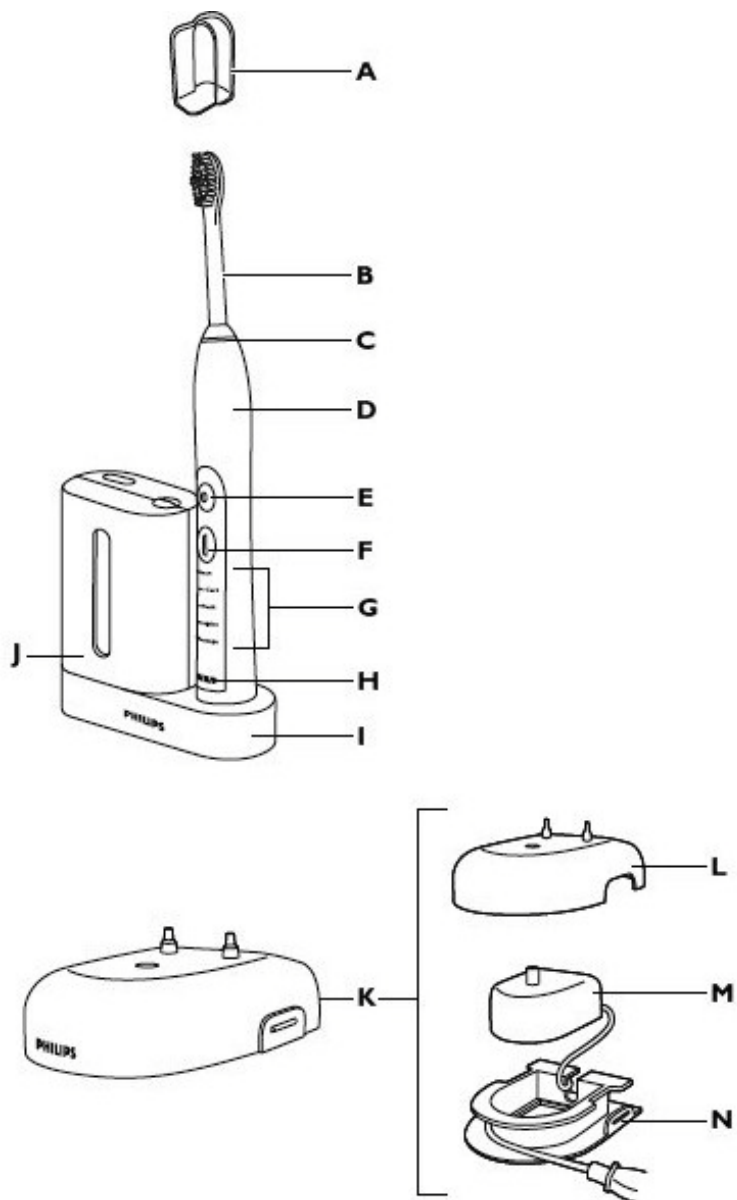

POZOR!

Držalo električne zobne ščetke Sonicare FlexCare +[®] je treba pred prvo uporabo polniti neprekinjeno vsaj 24 ur.

PREDSTAVITEV

Čestitamo za nakup električne zobne ščetke Sonicare! Ker vam podjetje Flegis, d. o. o., zagotavlja dodatno podporo, vam priporočamo, da svojo zobno ščetko registrirate na spletnem naslovu www.scetka-sonicare.com.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite, če jih boste morda potrebovali tudi pozneje.

Nevarnosti

Polnilnika ne postavljajte blizu vode. Ne postavljajte ali shranjujte ga na mesta, kjer lahko pade ali bi ga lahko potegnili v kad, umivalnik ali školjko. Ne potaplajte ga v vodo ali katero drugo tekočino. Preden polnilnik očistite, ga izklopite in se prepričajte, da je suh, preden ga vklopite v električno vtičnico.

Opozorila

1. Električnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, polnilnik zavržite. Da bi se izognili nesreči, okvarjen polnilnik vedno nadomestite z originalnim.
2. Polnilnika ne uporabljajte na prostem ali blizu izvora toplote.
3. Vedno uporabljajte originalne dele naprave, da bi se izognili nevarnosti.
4. Če je naprava kakor koli poškodovana (nastavek, držalo ali/in polnilnik), jo prenehajte uporabljati. V embalaži niso priloženi nadomestni rezervni deli. Če je naprava poškodovana, pokličite servis (glejte poglavje »Garancija in servis«).
5. Ta naprava ni namenjena za uporabo pri ljudeh (vključno z otroki) z zmanjšano telesno, čutno ali duševno sposobnostjo ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzirajo ali o uporabi poučijo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
6. Otroci naj bodo pod nadzorom. Bodite pozorni na to, da se z napravo ne igrajo.
7. Prenehajte uporabljati UV-čistilec, če UV-žarnica še sveti, ko so vratca UV-čistilca odprta. Ultravijolična svetloba lahko škodi očem in koži. UV-čistilec naj bo vedno nedosegljiv otrokom.

Previdno

1. Nastavkov, držala, polnilnika in zaščitnega pokrova za polnilnik ne čistite v pomivalnem stroju.
2. Če ste imeli v zadnjih dveh mesecih poseg v ustih ali operacijo dlesni, se pred uporabo tega proizvoda posvetujte z zobozdravnikom.
3. Z zobozdravnikom se posvetujte tudi, če se pojavi obilno krvavenje po uporabi naprave ali če se krvavenje ne ustavi po enem tednu uporabe.
4. Električna zobna ščetka Sonicare je bila preizkušena in je v skladu z varnostnimi standardi za elektromagnetne naprave. Če imate srčni spodbujevalnik ali katero koli implantirano napravo, se obrnite na svojega zdravnika ali proizvajalca teh naprav.
5. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo zobne ščetke Sonicare posvetujte z zdravnikom.

6. Ta naprava je namenjena samo za čiščenje vaših zob, dlesni in jezika. Ne uporabljajte je za druge namene. Če pri čiščenju zob, dlesni in jezika začutite neugodje ali bolečino, napravo prenehajte uporabljati ter se posvetujte z zdravnikom in zobozdravnikom.
7. Ne uporabljajte drugih nastavkov kot te, ki jih priporoča proizvajalec.
8. Če vaša zobna pasta vsebuje peroksid, sodo bikarono ali druge bikarbonate (značilne za belilne zobne paste), po vsaki uporabi z milom in vodo temeljito očistite nastavke in držalo, sicer se na plastiki lahko pojavijo razpoke.
9. Nastavkov, držala, polnilnika in zaščitnega pokrova za polnilnik ne čistite v pomivalnem stroju.
10. Med UV-čiščenjem in takoj po njem se ne dotikajte UV-žarnice, ker je vroča.
11. UV-čistilca ne uporabljajte brez zaščitne rešetke, ker se sicer lahko dotaknete vroče žarnice.

Elektromagnetna polja

Naprava ustreza vsem standardom, ki se navezujejo na elektromagnetna polja (EMP). Če z napravo ravnamo pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njena uporaba varna (to utemeljujejo znanstveni dokazi, ki so danes na voljo).

VSEBINA PAKIRANJA

- A. Higijenska potovalna kapica
- B. Nastavek
- C. Zamenljiv barvni obroček
- D. Držalo s protizdrsno oblogo
- E. Gumb za vklop in izklop
- F. Gumb za izbiro načina ščetkanja
- G. Indikator načina ščetkanja
- H. Indikator napoljenosti baterije
- I. Podstavek UV-čistilca (*UV Sanitiser*) z vgrajenim polnilnikom in ovijalnikom kabla (nekateri modeli)
- J. UV-čistilec (*UV Sanitiser*)
- K. Luksuzni polnilnik (nekateri modeli)
- L. Pokrov za polnilnik s stojalom za nastavke
- M. Potovalni polnilnik
- N. Podnožje polnilnika za ovijanje kabla (nekateri modeli)

Ni prikazano: UV-žarnica

Ni prikazano: odcejalnik UV-čistilca (*UV Sanitiserja*)


Ni prikazano: zaščitna rešetka za UV-žarnico

PRIPRAVA


MENJAVA BARVNIH OBROČKOV

Nastavki za električno zobno ščetko Sonicare imajo priložene barvne obročke, ki jih lahko menjate in s tem označite svoj nastavek.


Kako zamenjamo obroček:

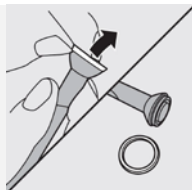

1. Z dna nastavka odstranite barvni obroček.

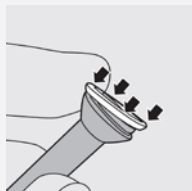

2. Na rob nastavka pritrdite nov obroček. Pritisnite, da se obroček zaskoči.

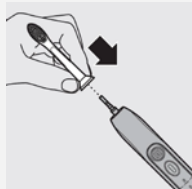


PRITRDITEV NASTAVKA

1. Nastavek poravnajte tako, da ščetine gledajo proti lični strani držala.
2. Nastavek trdno pritisnite na jekleni zatič, da se pritrdi.

Pomnite! Med pritrdjenim nastavkom in držalom se lahko pojavi prostor, kar je običajno.

POLNJENJE

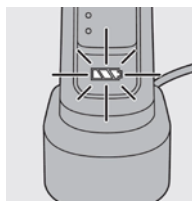

1. Potovalni polnilnik ali polnilnik z UV-čistilcem vklopite v vtičnico.
 2. Na polnilnik postavite držalo.
- Utripajoča lučka na držalu kaže, da se držalo polni.

Indikator napolnjenosti baterije prikazuje naslednje:

- ena zelena lučka: 34–66-odstotna napolnjenost
- dve zeleni lučki: 67–94-odstotna napolnjenost
- tri zelene lučke: popolna napolnjenost
- ena utripajoča lučka: manj kot 25-odstotna napolnjenost

Pomnite! Če je napolnjenost baterije slaba, boste po dveminutnem ščetkanju zaslišali tri kratke zvočne signale in videli utripati rumeno lučko (približno 30 sekund).

Pomnite! Če naprave ne uporabljate, lahko držalo pustite na polnilniku. Tako ohranjate baterijo stalno napolnjeno. Ko je držalo polno in stoji na priključenem polnilniku, iz vtičnice porablja minimalno količino električne energije.

Pomnite! Da se baterija popolnoma napolni, potrebuje vsaj 24 ur.

UPORABA



Tehnike ščetkanja

1. Zmočite ščetine in nanje nanesite malo zobne paste.
2. Ščetine nežno postavite na rob dlesni, nastavek naj bo pod rahlim kotom.
3. Vključite zobno ščetko.
4. Rahlo pritisnite, da povečate učinkovitost električne zobne ščetke Sonicare, ki naj delo opravi namesto vas. Ne drgnite.
5. Nastavek nežno in počasi premikajte po zobeh v kratkih pomikih naprej in nazaj, tako da daljše ščetine sežejo med vaše zobe. Take gibe nadaljujte ves cikel ščetkanja.

Pomnite! Svoja usta razdelite na štiri področja in uporabite funkcijo Quadpacer (glejte poglavje »Funkcije«). S tem boste vse zobe enakomerno in temeljito očistili.

6. Začnite ščetkati področje 1 (zunanje ploskve zgornjih zob) in čistite 30 sekund, nato pa se pomaknite na področje 2 (notranje ploskve zgornjih zob). Ščetkanje nadaljujte na področju 3 (zunanje ploskve spodnjih zob), čistite 30 sekund in se pomaknite na področje 4 (notranje ploskve spodnjih zob).
7. Ko ste končali ščetkanje, namenite nekaj časa še čiščenju griznih ploskev zob in področju, kjer se pojavljajo madeži. Z vklopljeno ali izklopljeno zobno ščetko lahko očistite tudi jezik.

Vaša električna zobna ščetka Sonicare je varna za uporabo:

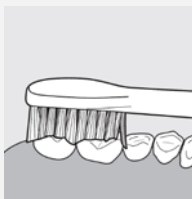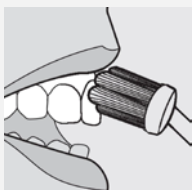

- tudi če imate fiksni ortodontski aparat (ščetine nastavkov se pri ščetkanju ortodontskih aparatov hitreje obrabijo),
- tudi če imate mostičke, implantate, plombe, krone, prevleke.

OSEBNE NASTAVITVE

Električna zobna ščetka Sonicare samodejno začne ščetkati v privzetem načinu Clean.

- Preden vključite električno zobno ščetko Sonicare, pritisnite gumb za izbiro načina ščetkanja, da izberete način in program ščetkanja.
- Izbrani način sveti.
- Ko ste izbrali način ščetkanja, ostane aktiven, dokler ne izberete drugega načina ščetkanja.

Pomnite! Ko je zobna ščetka vključena, ne morete izbirati med načini ščetkanja.

NAČINI ŠČETKANJA

Način Clean

Popolno ščetkanje celotnih ust (2 minuti)

Način Gum Care

Popolno ščetkanje celotnih ust (2 minuti) ter nežno ščetkanje problematičnih mest in roba dlesni (1 minuta)

Način Refresh

1-minutna osvežitev zob

Način Sensitive

Nežno ščetkanje občutljivih zob in dlesni (2 minuti)

Način Massage

Nežna masaža dlesni (2 minuti)

Pomnite! Kadar se električna zobna ščetka Sonicare uporablja v kliničnih raziskavah mora biti izbran 2-minutni način Clean. Držalo mora biti maksimalno napolnjeno. Funkcija Easy-start mora biti izključena. Področja, kjer se pojavljajo madeži, se lahko ščetka dodatnih 30 sekund.

FUNKCIJE

FUNKCIJA EASY-START

- Pri tem modelu električne zobne ščetke Sonicare je funkcija Easy-start že vključena.
- Funkcija Easy-start postopoma povečuje moč ščetkanja prvih 14 ščetkanj.

Pomnite! Vsako ščetkanje mora trajati vsaj 1 minuto, da se pravilno pomikate skozi funkcijo Easy-start.

Izključitev in vključitev funkcije Easy-start

1. Nastavek s ščetko pritrдите na držalo.
2. Držalo postavite na polnilnik, ki je priključen na električno omrežje.

Izključitev funkcije Easy-start

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 2 sekundi. Funkcija Easy-start je izključena, ko zaslišite en kratek pisk.

Vključitev funkcije Easy-start

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 2 sekundi. Funkcija Easy-start je vključena, ko zaslišite dva kratka piska.

Pomnite! Ne priporočamo daljše uporabe funkcije Easy-start, saj se zmanjša učinkovitost odstranjevanja zobnih oblog.

MERILNIK ČASA SMARTIMER

Funkcija Smartimer opozarja, da je ščetkanje končano, tako da se zobna ščetka po dveh minutah samodejno izključi. Zobozdravniki priporočajo, da ustno votlino ščetkate vsaj dve minuti.

QUADPACER – INTERVALNI MERILNIK ČASA

Quadpacer je intervalni merilnik časa, ki vas z zvočnim signalom in kratko prekinitevijo ščetkanja opomni, da očistite vsa štiri področja svojih zob. Intervalni merilnik časa vas med ščetkanjem opozarja v različnih intervalih – odvisno od tega, kateri program ali način ščetkanja ste izbrali. Preberite še poglavji »Uporaba« in »Osebne nastavitve«.

Merilnik časa Quadpacer je vključen. Če ga želite izključiti:


1. Postavite držalo s pritrjenim nastavkom na polnilnik, ki je priključen na električno omrežje.



2. Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za izbiro načina ščetkanja.
3. Ko zaslišite en kratek zvočni signal, je merilnik izključen, ob dveh kratkih zvočnih signalih pa je merilnik vključen.

PODNOŽJE POLNILNIKA ZA OVIJANJE KABLA NA LUKSUZNEM POLNILNIKU (nekateri modeli)


Če sta v vašem pakiranju pokrov in podnožje za luksuzni polnilnik, je potovalni polnilnik pod pokrovom. Če želite skrajšati električni kabel, lahko ostanek kabla ovijete okoli podnožja polnilnika.

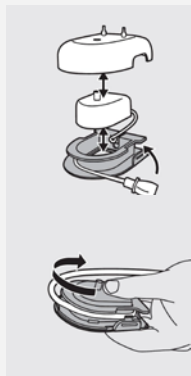

1. Pritisnite na dve sivi prečki na podnožju polnilnika, da ločite pokrov polnilnika in podnožje ter dvignite pokrov.
2. Odvečni kabel ovijte okoli sivega podnožja polnilnika, kot je prikazano na sliki. Bodite pozorni na to, da ste kabel ovili po žlebu.
3. Ko ste shranili odvečni kabel, izvalcite električni kabel skozi žlebiček na zadnjem delu sivega polnilnika.
4. Ponovno pritrdite pokrov polnilnika, tako da ga pritisnete navzdol čez podnožje polnilnika, dokler se ne zaskoči.



Nasvet: Na potovanjih lahko potovalni polnilnik odstranite ter ga uporabite brez pokrova in podnožja.

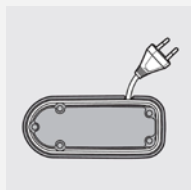

Ovijanje kabla na UV-čistilcu (*UV Sanitiser*) z vgrajenim polnilnikom


- Če ima vaš model UV-čistilec (*UV Sanitiser*), lahko odvečni kabel shranite na dnu čistilca.

UV-ČIŠČENJE (*Sanitizing*)

- Nastavke lahko po vsaki uporabi očistite z UV-čistilcem (*UV Sanitiser*).



Prenehajte uporabljati UV-čistilec, če še gori UV-žarnica, ko so odprta vratca, ali če je zlomljeno oziroma počeno modro okence na vratcih. UV-svetloba lahko škodi človeškim očem ali koži. Ta naprava mora biti nenehno nedosegljiva otrokom.



Izključite UV-čistilec, če ste med delovanjem UV-čistilca (UV Sanitiser) opazili dim ali vonj po dimu.

1. Po ščetkanju zob očistite nastavek in otresite odvečno vodo.
Med UV-čiščenjem na nastavek ne dajajte potovalne kapice.
2. Odprite vrata UV-čistilca tako, da s prstom potegnete vratca UV-čistilca k sebi.
3. Nastavek postavite na enega od dveh kljukic v UV-čistilcu.
 - Bodite pozorni na to, da so ščetine nastavka usmerjene neposredno v žarnico.

Pomnite! V UV-čistilcu čistite samo nastavke Sonicare ProResults.

4. Preverite, ali je UV-čistilec vključen v vtičnico s pravo napetostjo.
5. Zaprite vratca in pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop, da sprožite cikel čiščenja.


Pomnite! UV-čistilec (UV Sanitiser) lahko vklopite le, če so vratca pravilno zaprta.

Pomnite! UV-čistilec (UV Sanitiser) se ustavi, če med čiščenjem odprete vratca.

Pomnite! Čiščenje traja 10 minut, nato se samodejno konča.

- UV-čiščenje poteka, ko modra svetloba sveti skozi okence.
- Ko je UV-čiščenje zaključeno, UV-lučka LED sveti zeleno, UV-čistilec pa se samodejno izklopi.

ČIŠČENJE

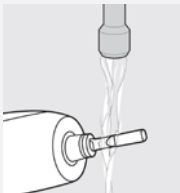


Nastavkov, potovalnega polnilnika in UV-čistilca ne čistite v pomivalnem stroju.

Držalo

1. Odstranite nastavek in splaknite jekleni zatič.

Na gumeno zaporko na jeklenem zatiču ne pritiskajte z ostrim predmetom, ker lahko pride do poškodb.

2. Celotno držalo obrišite z vlažno krpo.

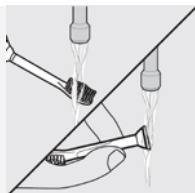

Nastavek

1. Po vsaki uporabi splaknite nastavek in ščetine.
2. Vsaj enkrat na teden odstranite nastavek z držala in s toplo vodo splaknite spodnji del nastavka.

Polnilnik


1. Izklopite polnilnik.
2. Z vlažno krpo obrišite površino polnilnika.



UV-čistilec (UV Sanitiser) (nekateri modeli)

Ne čistite UV-čistilca, če je UV-žarnica vroča. Za optimalno učinkovitost je priporočljivo, da UV-čistilec očistite enkrat na teden.

1. Izklopite UV-čistilec.
2. Rahlo dvignite posodico za odtekanje kapljic in jo izvlecite. Nato jo splaknite in z vlažno krpo obrišite do čistega.
3. Vse površine reflektorja očistite z vlažno krpo.
4. Odstranite zaščitno rešetko pred UV-žarnico, tako da jo nežno dvignete (1) in izvlečete (2).
5. Odstranite UV-žarnico, tako da jo primete in potegnete iz jeklenega zatiča.
6. Zaščitno rešetko in UV-žarnico očistite z vlažno krpo.
7. Ponovno vstavite UV-žarnico, tako da dno žarnice najprej poravnate z jeklenim zatičem nato pa jo potisnete vanj.
8. Ponovno namestite zaščitno rešetko, tako da kljukice na rešetki poravnate z odprtnicami na refleksni površini zraven UV-žarnice. Nato kljukice vstavite v odprtine, zaščitna rešetka pa naj zdrsne navzdol, tako da je pritrjena v UV-čistilec.

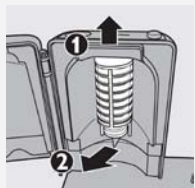

SHRANJEVANJE

- Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo izklopite iz električnega omrežja, očistite in shranite na hladnem in suhem, stran od neposredne svetlobe. Električni kabel navijte na navijalec.

ZAMENJAVA NASTAVKOV

- Za optimalne rezultate je treba nastavke zamenjati vsake 3 mesece.

- Uporabljajte samo nastavke Sonicare ProResults.


UV-ŽARNICA

UV-žarnico lahko naročite pri uvozniku za Slovenijo. (Pokličite 02/460 53 42.)





ODSTRANITEV IZ OKOLJA

- Akumulacijske baterije v držalu ne morete zamenjati, jo pa lahko enostavno odstranite in recikirate. Na koncu dobe uporabnosti naprave, in preden jo odstranite iz okolja, prosimo, da odstranite akumulacijsko baterijo iz držala, tako da sledite navodilom v nadaljevanju.
- Naprave ali UV-žarnice (žarnica vsebuje živo srebro) ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke, ampak med zbirne odpadke. S tem varujete okolje.
- Za natančnejše informacije se pozanimajte pri lokalnem odlagališču odpadkov.

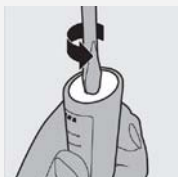

Odstranitev akumulacijske baterije

Opozorilo! Potem ko boste držalo električne zobne ščetke Sonicare odprli, ščetka ne bo več uporabna.

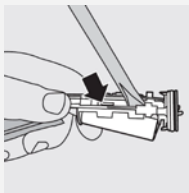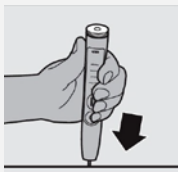

- Akumulacijsko baterijo odstranite s standardnim izvijačem. Upoštevajte osnovna varnostna navodila, tudi ko boste sledili navodilom v nadaljevanju. Poskrbite za zaščito oči, rok, prstov in površine, na kateri delate.
1. Da popolnoma izpraznite akumulacijsko baterijo, odstranite držalo iz polnilnika, ga vklopite in pustite delovati, dokler ne preneha. Ponavljajte, dokler držalo ni popolnoma prazno.
 2. V žleb na dnu držala vstavite izvijač in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da sprostite spodnji pokrov.
 3. Obrnite držalo in pritisnite na zatič, da sprostite notranje sestavne dele držala.
 4. Izvijač vstavite pod električno mrežno ploščico, zraven stika z baterijo, in obrnite, da prekinete kontakt. Iz plastičnega nosilca odstranite električno mrežno ploščico in baterijo. Akumulacijsko baterijo lahko nato recikirate, ostale dele proizvoda pa pravilno odvržete.

GARANCIJA IN SERVIS

Garancija velja dve leti od dneva nakupa.

Izjava: Proizvajalec jamči za kakovost blaga oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku (dve leti), ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija se nanaša na držalo in polnilnik, ne pa na nastavke.

Garancija se ne nanaša na normalno obrabo izdelka, kot so praske, odrgnine, abrazija materiala, razbarvanje materiala.

Garancija za držalo in polnilnik vaše zobne ščetke Sonicare For Kids velja dve leti od dneva nakupa. Če držalo ali polnilnik zaradi katerega koli vzroka v prvih dveh letih uporabe ne bi več delovala, bo proizvajalec oziroma dobavitelj (podjetje Flegis, d. o. o., v Sloveniji) okvarjene dele brezplačno zamenjal z novimi (velja za polnilnik in držalo, ne pa tudi za nastavke).

Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom, uporabe z električnimi pretvorniki ali transformatorji in mehanske poškodbe so pri tem izvete.

Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca. Če garancijski list ni pravilno izpolnjen, predložite račun.

Garancija preneha, če je bilo ugotovljeno, da je v proizvod posegla nepooblaščen oseba ali je vanj vgrajen neoriginalni del.

Po preteku garancijskega roka bo proizvajalec nadomestne dele zagotavljal še 6 let.

Servis

V primeru okvare pokličite na telefonsko številko 02/460 53 46.

Podjetje Flegis, d. o. o., zagotavlja, da bo okvare in pomanjkljivosti blaga, sprejetega v popravilo, odpravil najpozneje v 45 dneh od dneva, ko je dajalec garancije prejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

REŠEVANJE MOREBITNIH TEŽAV

Če težave ne boste mogli rešiti z naslednjimi rešitvami, vas prosimo, da za pomoč pokličete dobavitelja, podjetje Flegis, d. o. o., na telefonsko številko 02/460 53 42.

| Težava | Rešitev |
|---|---|
| Zobna ščetka Sonicare® ne dela. | Morda je treba napolniti držalo. Držalo polnite vsaj 24 ur. Prepričajte se, da je polnilnik priključen na električno omrežje. Preverite, ali imate morda vgrajeno vtičnico, v kateri ni električnega toka, če v kopalnici ugasnete luč. Morda je treba ponovno namestiti nastavek ali ga zamenjati z novim. |
| Kadar uporabljam Sonicare®, občutim žgečkanje. | To je povsem običajno. Zobno ščetko Sonicare® lahko uporabljate naprej in ščetin ne pritiskajte močno na zobe in dlesni. Z vsako nadaljnjo uporabo bo občutek žgečkanja manjši. |
| Nastavek ob mojih zobeh ropota. | Temu se lahko izognete, tako da nastavek pravilno postavite s ščetinami na rob dlesni in pod kotom. |
| Zakaj med ščetkanjem čutim občasne prekinitve ščetkanja? | Vklopljena je funkcija Quadpacer – intervalni merilnik časa, ki vas s kratko prekinitvijo ščetkanja opomni, da očistite vsa področja vaših zob. (Glejte poglavje »Funkcije«.) |
| Zdi se mi, da moč ščetke popušča. | Morda je treba napolniti držalo. Preverite, ali morda ni vključena funkcija Easy-Start®. Izključite jo. Morda je treba zamenjati nastavek. |
| Zakaj gumb za izbiro načina ščetkanja ne dela med ščetkanjem? | Način ščetkanja je treba izbrati pred vklopom zobne ščetke Sonicare. |
| Zakaj ne deluje UV-čistilec (UV Sanitiser)? | Morda je treba UV-čistilec vključiti v vtičnico. Morda je treba zapreti vrata UV-čistilca. Morda je treba zamenjati UV-žarnico. |
| Ali na potovanju potrebujem poseben polnilnik? | Nasvet: Polnilnik Sonicare in UV-čistilec se lahko uporabljata z vsemi napetostmi po svetu med 100 in 240 AC pri 50 ali 60 Hz. Vse, kar potrebujete, je adapter za vtičnico. |

flegis



*Zdrav nasmeh
je uspeh!*

Sedež:

FLEGIS, d. o. o.

Ulica mladinskih brigad 54

2204 Miklavž na Dravskem polju

PE Maribor:

FLEGIS, d. o. o.

Perhavčeva ulica 22

2000 Maribor

Tel.: 02/460 53 42

Servis: 02/460 53 46

Faks: 02/460 53 43

E-pošta: info@flegis.si

www.flegis.si

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca: